


deconex® 36 INTENSIV-x

**Снажан, неутралан и еколошки
концентрат за чишћење**

За ручно чишћење инструмената и површина

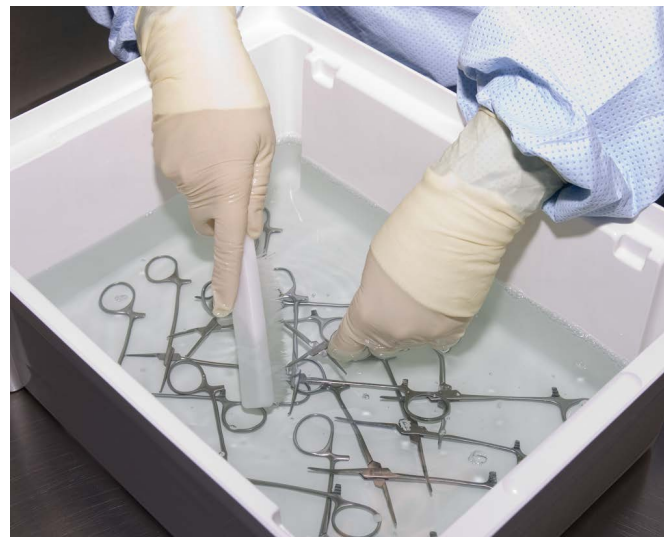

Примена

deconex® 36 INTENSIV-x се користи за темељно и пажљиво чишћење свих перивих површина, предмета и инструмената.

deconex® 36 INTENSIV-x је такође погодан за потапање инструмената на дуже периоде који чекају на аутоматизовану поновну обраду (преко ноћи, викендом). На тај начин се може избећи корозија или исушивање органског материјала. Исперите инструменте водом пре пуњења машине.

Посебна примена средства deconex® 36 INTENSIV-x је за чишћење површина и инструмената од пластичних или гумених материјала (флексибилни ендоскопи, анестетичка опрема), пре замене дезинфекционог средства (који садржи алдехид → садржи амин или обрнуто).

deconex® 36 INTENSIV-x је такође погодан за употребу у ултразвучним кадицама.

Својства

Због своје оптималне мешавине сурфактанта, deconex® 36 INTENSIV-x има инхерентну високу моћ чишћења посебно органских материјала.

deconex® 36 INTENSIV-x је pH-неутралан и стога показује широк спектар компатибилности материјала.

У својој специјалној примени, пре промене дезинфекционог средства, deconex® 36 INTENSIV-x уклања остатке дезинфекционог средства са пластике и гуме, чиме спречава настанак површинских појава као што су промене боје, које настају услед хемијске реакције алдехида са аминима.

deconex® 36 INTENSIV-x се заснива на формули без NTA и фосфата. Сви састојци у производу су лако биоразградиви.

Састојци

Сурфактанти, комплексирајући агенси, инхибитори корозије

Дозирање

Verwendung	Дозирање	Напомене
Дужи периоди потапања за инструменте пре аутоматског чишћења	0.2-0.5%	Користите раствор само једном. Исперите инструменте водом пре пуњења машине.
Чишћење хируршког инструмента пре дезинфекције	0.5-1.0%	Потопите инструмент 2–15 минута, четкајте ако је потребно. Користите раствор само једном. Исперите инструменте водом.
Ултразвучно чишћење	0.5-1.0%	5 минута соникације
Пре замене дезинфекционог средства, у случају инструмената од гуме и синтетичких материјала	3.0%	Потопите инструменте на 2–3 ч. Након тога темељно исперите водом из славине и осушите чистом крпом.
Површина	0.5%	Пре замене дезинфекционог средства, нанесите производ два пута.

deconex® 36 INTENSIV-x

Усклађеност са материјалима

Погодно за:

ПВЦ, линолеум, гуму, пластичне материјале, нерђајући челик, алуминијум, елоксирани алуминијум, обојене метале, керамику

Код материјала који нису наведени, сами обавите специфичне тестове усклађености или се посаветујте са компанијом Borer Chemie AG.

Подаци о хемијско-физичким карактеристикама

рН вредност	1% раствор у деминерализованој води	приближно 7.5
Густина	концентрата	1.06 g/mL
Изглед	концентрата	провидан, безбојан до жут

Складиштење и транспорт

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

Ово медицинско средство је осетљиво на мраз. Када год је могуће, избегавајте транспорт овог производа током хладних периода. Ако је транспорт током таквих периода неизбежан, овај производ мора да се испоручи помоћу камиона/контејнера за поморски транспорт са регулацијом температуре на температури изнад 5 °C или морају да се користе заштитни поклопци за краткотрајни транспорт који траје најдуже 10 сати, при чему температура приликом транспорта не сме да буде нижа од -5 °C.

Расположивост

Распитајте се код локалног представника о тренутним величинама посуда.

Посуде, навојни затварачи и етикете су направљени од полиетилена који се рециклира.

Ознака CE

deconex® 36 INTENSIVx испуњава захтеве за медицинска средства у складу са прописом (EU) 2017/745.

Додатне информације

Информације о безбедности на раду, складиштењу и уништавању/уклањању отпада потражите у одговарајућем безбедносном листу.

Искористите наше опширно знање! Обратите нам се за додатне информације у вези са вашом специфичном применом.

Дистрибутер / увозник:

Произвођач:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions