

deconex® 41 STS

**Киселински, еколошки производ
за миење-пакнење и спречување
појава на бигор**

За употреба во машини за миење/дезинфекција
на садови за телесни екскрети од луѓе



Примена

deconex® 41 STS се користи за миење-пакнење и превенција од појава на бигор во машините за автоматска деконтаминација, за миење и дезинфекција на лопатки, гуски, чашки за секретети и други садови и прибор за отпад.

1. предпакнење
2. главен циклус на миење
3. дезинфекција
4. ладење/последно пакнење

Состојки

Органски киселини, сурфактанти, средство за заштита од корозија, агенси за секвестрирање, солубилизатор, боја


Дозирање

Тврдина на водата [°dH]	Тврдина на водата [°fH]	Дозирање
0-7	0-12	1.0 mL/L
7-15	12-27	1.5 mL/L
15-25	27-45	2.0 mL/L

Својства

deconex® 41 STS го спречува формирањето на талози на деловите што се мијат и во машините во млазниците и во цевките. Киселиот концентрат за пакнење го забрзува процесот на сушење на деловите што се мијат и во исто време го спречува формирањето дамки од водата. Во машините со вграден генератор на пареа, deconex® 41 STS го спречува формирањето бигор во котлите.

Температурен профил на процесот за деконтаминација на садови за телесни екскрети од луѓе

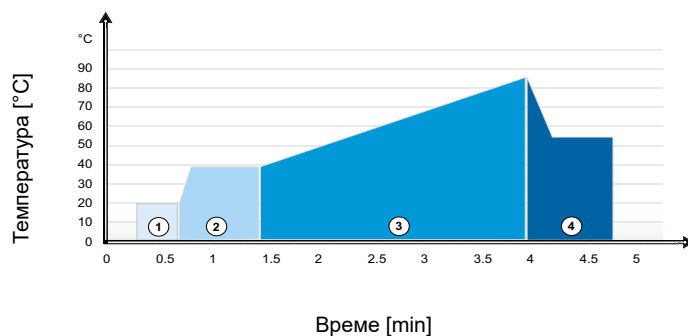

deconex® 41 STS

Информации за употребата

Соодветен само за системи за дозирање отпорни на киселини. Концентратот не смее да се пренесува низ бакарни цевки или да се дозира во глави на пумпи направени од лиено железо.

Компатибилност со материјалите

Соодветен за:
не'рѓосувачки челик, алуминиум, пластика, стакло

За материјалите што не се споменати, направете ваши конкретни тестови за компатибилност или консултирајте се со Borer Chemie AG.

Хемиски/физички податоци

рН	1 % раствор на деминерализирана вода	прибл. 2.6
Густина	концентрат	1.10 г/мл
Изглед	концентрат	провидна, сина течност

Достапност

Информирајте се кај вашиот локален претставник за актуелните големини на пакувањата.

Садовите, капачињата и налепниците се направени од полиетилен што може да се рециклира.

Складирање и транспорт

Чувајте го производот на температури меѓу 5 и 25 °С.

Овој медицински уред може да замрзне. Секогаш кога е возможно, избегнувајте да го транспортирате производот во периоди кога е многу ладно. Ако транспортот во такви периоди е неизбежен, производот треба да се достави во возило/бродски контејнер каде што температура е контролирана и е над 5 °С, или пак со употреба на заштитни прекривки за кратки периоди на транспорт, не подолги од 10 часа каде што температурата нема да падне под 5 °С.

Ознака CE

deconex® 41 STS ги исполнува условите за медицински уреди согласно Регулативата (EU) 2017/745.

Дополнителни информации

За информации во врска со безбедноста на работа, складирањето и отстранувањето на отпадот/отпадните течности, погледнете го соодветниот лист со податоци за безбедност.

Искористете го нашето обемно знаење! Јавете ни се за дополнителни информации во врска на вашата конкретна примена.

Дистрибутер / увозник:

Производител:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



advanced cleaning solutions