

Uputstvo za upotrebu

deconex® ORGANACID

Neutralizator na bazi kiseline i sredstvo za prethodno čišćenje

Služi za neutralizaciju nakon čišćenja u mašinama
za pranje i dezinfekciju, kao i za kiselo predčišćenje.
Tečnost bez fosfata.



Opseg primene

Sredstvo deconex® ORGANACID se koristi za kiselu neutralizaciju, kao glavno sredstvo za sterilizaciju nakon automatskog čišćenja. Sredstvo deconex® ORGANACID takođe može da se koristi za uklanjanje naslaga rastvorljivih u kiselinama.

Svojstva

Sredstvo deconex® ORGANACID je blagokiseli neutralizator bez površinskih aktivnih materija i koristi se u specijalnim mašinama za pranje nakon faze čišćenja. Proizvod nežno uklanja alkalne ostatke sa predmeta koji se peru, čime sprečava pojavu mrlja i trajnog oštećenja materijala (npr. materijala za anesteziju) koji mogu da nastanu u naknadnom ciklusu ponovne obrade.

Sredstvo deconex® ORGANACID može da se koristi i za predčišćenje da bi se uklonile naslage rastvorljive u kiselinama, kao što su ostaci kamenca.

Sredstvo deconex® ORGANACID se koristi i kao sredstvo za neutralizaciju i kao glavno sredstvo za sterilizaciju, posebno kada se aluminijumski instrumenti ponovo obrađuju odvojeno od instrumenata od nerđajućeg čelika ili zajedno sa njima. Osim toga, proizvod se koristi i za neutralizaciju nakon čišćenja materijala za anesteziju blagoalkalnim sredstvom.

Proizvod ne sadrži fosfate, zbog čega je posebno pogodan za neutralizaciju u procesu čišćenja bez fosfata (u okviru analitičke hemije).

Primena i doziranje

Opšte preporuke:

- korpe i mašine opteretite ispravno (izbegavajte prepunjavanje),
- vodite računa da nijedna površina ne ostane neoprana,
- postarajte se da se sredstvo za pranje potpuno ocedi pre neutralizacije, i
- za poslednje ispiranje koristite dejonizovanu vodu

Preporučena doza

Optimalno doziranje uglavnom zavisi od količine alkalnih ostataka. Zato se postarajte da se alkalna tečnost za pranje potpuno ocedi u programu mašine za pranje.

U praksi, sledeći način doziranja daje dobre rezultate:

deconex® ORGANACID

1-3 mL/L

Temperatura

20-50 °C

Sredstvo se obično dodaje pomoću aparata za doziranje.


deconex® ORGANACID

Preporučeni postupak

Uobičajeni postupak pranja i dezinfekcije

1. Predispiranje: hladnom pijaćom vodom, 3 min
2. Čišćenje: pijaćom vodom
Dodati deconex® 21 CLF na 30 °C
Čistiti na 60 °C u trajanju od 5 min
3. Međuispiranje I (neutralizacija): topлом (40-45 °C) pijaćom vodom, 1 min
Doza sredstva deconex® ORGANACID
4. Međuispiranje II: dejonizovanom vodom/reverznom osmozom, 1 min
5. Toplotna dezinfekcija: dejonizovanom vodom/reverznom osmozom, npr. 5 min. na 90 °C, ako je primenjivo doza sredstva deconex® 64 NEUTRADRY kao pomoć pri sušenju na 90 °C
6. Sušenje: 5-15 min

Dijagram postupka pranja i dezinfekcije

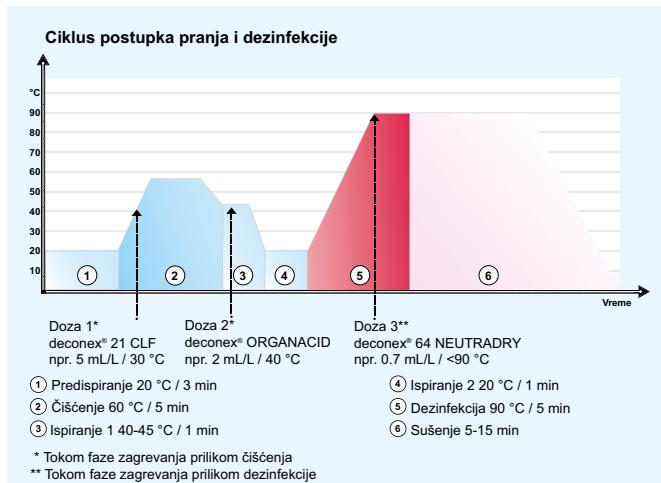

Informacije o bezbednosti

Molimo vidite sigurnosno-tehnički list za deconex® ORGANACID da biste pronašli informacije o industrijskoj bezbednosti i ispravnom odlaganju.

Skladištenje

Proizvod čuvati na temperaturi između 5 i 25 °C.

Distributer / uvoznik:

Proizvodjač:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



 **borer**

advanced cleaning solutions

List s podacima o proizvodu

deconex® ORGANACID

Neutralizator na bazi kiseline i sredstvo za prethodno čišćenje

Služi za neutralizaciju nakon čišćenja u mašinama za pranje i dezinfekciju, kao i za kiselo predčišćenje. Tečnost bez fosfata.



Sastojci

Organska kiselina

Usklađenost sa materijalima

Pogodno za:

Nerđajući čelik, aluminijum, anodno obrađeni aluminijum, plastiku, gumu, lateks, laboratorijsko staklo i keramiku

Za materijale koji nisu navedeni korisnik treba da sproveđe odgovarajuće testove usklađenosti ili da se obrati kompaniji Borer Chemie AG.

Koncentrat:

Molimo da zatražite zaseban list sa informacijama o usklađenosti kada je reč o transportu i peristaltičkim crevima.

Oznaka CE

deconex® ORGANACID ispunjava zahteve za medicinska sredstva u skladu sa propisom (EU) 2017/745.

Fizičko-hemijski podaci

pH vrednost	1 % rastvor u demineralizovanoj vodi	oko 2.6
Gustina	koncentrat	1.17 g/mL
Izgled	koncentrat	prozirno, bezbojno

deconex® ORGANACID

Pakovanje

Posuda, zaptivači i etikete su napravljeni od polietilena koji se reciklira.

Veličine posuda

Vrsta posude	Kapacitet posude	Broj predmeta
Kanister duboko	5 L	502155.00-KK5R
Kanister	10 L	502155.00-K10R
Kanister	25 L	502155.00-K25R

Dodatne informacije

Pre upotrebe proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu i odgovarajući sigurnosno-tehnički list.

Iskoristite naše znanje! Obratite nam se za dodatne informacije u vezi sa vašom konkretnom primenom.

Distributer / uvoznik:

Proizvodjač:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

BC-CH 1.0_211221_SR



DB deconex ORGANACID